


ABRADERE® - korony i mosty konwencjonalne

Abradere® to marka Biomain dla indywidualnie dostosowywanych koron i mostów konwencjonalnych. Oferujemy wykonane z niezwykłą precyzją przy użyciu najnowszej technologii CAD/CAM, korony i mosty z tytanu, stopu chromokobaltu oraz cyrkonu.

Klienci mogą używać skanera 3Shape lub jakiegokolwiek innego skanera, który umożliwi utworzenie pliku STL, a następnie bezpośrednio wysłać swoje zamówienie w formie pliku, do działu produkcji firmy Biomain AB. Biomain wykonuje dokładny, gotowy do dalszej obróbki most.

Korzyści

- Perfekcyjne dopasowanie
- Szybka realizacja
- Homogeniczny materiał wolny od pęcherzy i naprężeń

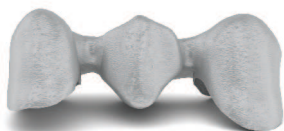

Abradere ze stopu chromokobaltu

- Wypalane laserem korony i mosty
- Typ 4 stopu chromokobaltu – zgodnie ze standardem EN ISO 22674:2006
- Doskonała opcja dla biokompatybilności


Czas produkcji 48 godzin + transport



Abradere z cyrkonu

- Cyrkon w 4 kolorach lub bezbarwny cyrkon
- Możliwość wykonania mostu do 7 punktów

Czas produkcji 72 godziny + transport

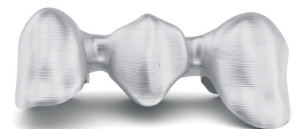

Abradere z tytanu

- W pełni wyfrezowane korony i mosty
- Tytan 2 stopnia zgodny ze standardami
- Doskonała opcja dla biokompatybilności
- Możliwość produkcji mostu do 10 punktów

Czas produkcji 72 godziny + transport